

TANITA

Monitoring Your Health

www.distrimed.com

Tanita Corporation

14-2, 1-Chrome, Maeno-Cho
Itabashi-Ku, Tokyo, Japan 174-8630
Tel: +81(0)-3-3968-2123
Fax: +81(0)-3-3967-3766
www.tanita.co.jp
ISO 9001 Certified

Tanita Corporation of America

2625 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005 USA
Tel: +1-847-640-9241
Fax: +1-847-640-9261
www.tanita.com
(800) Tanita-8 (USA & Canada Only)

Tanita France S.A.

Villa Labrouste
68 Boulevard Bourdon
92200 Neuilly-Sur-Seine France
Tel: +33 (0)-1-55-24-99-99
Fax: +33 (0)-1-55-24-98-68
www.tanita.fr

Tanita Health Equipment H.K. Ltd.

Unit 301-303 3/F Wing On Plaza
62 Mody Road, Tsimshatsui East
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2838 7111
Fax: +852 2838 8667

Tanita Europe GmbH

Dresdener Strasse 25
D-71065 Sindelfingen
Germany
Tel: +49 (0)-7031-6189-6
Fax: +49 (0)-7031-6189-71
www.tanita.de

Tanita UK Ltd.

The Barn, Philpots Close, Yiewsley,
Middlesex, UB7 7RY UK
Tel: +44 (0) 1895 438577
Fax: +44 (0) 1895 438511
www.tanita.co.uk

TANITA

Monitoring Your Health


Professional Raised Dial



MODE D'EMPLOI

Pèse-personne professionnel avec cadran à aiguille surélevé – HA-503

- ❶ Plate-forme de pesée
- ❷ Écran du cadran

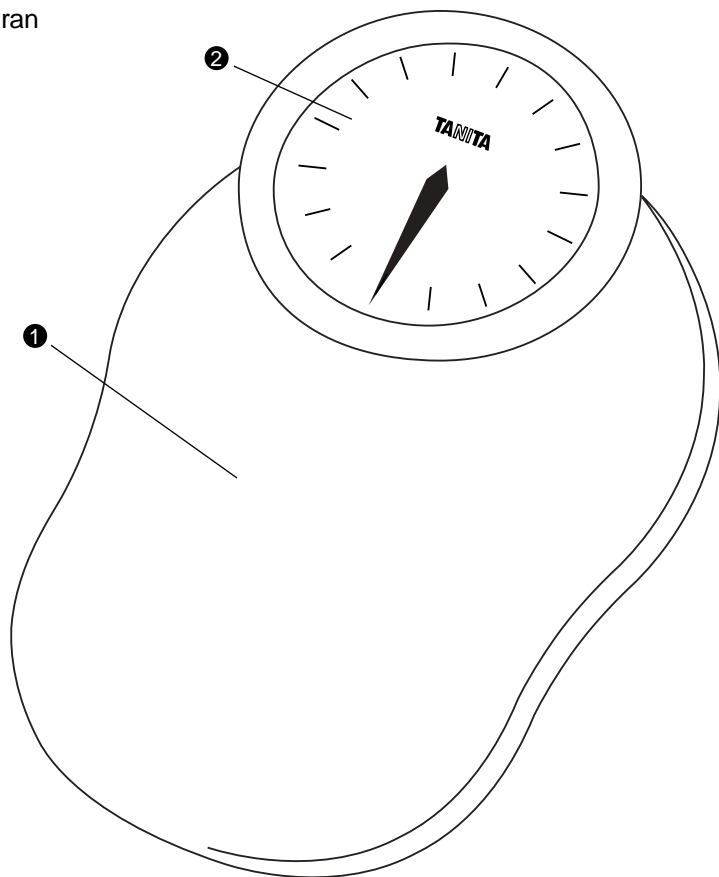

Spécifications

Capacité maximale: 400 lb (180 kg)
Graduation: 0.45 kg (0.5 kg)

Spécifications UK

Capacité maximale: 23 st/lb (150 kg)
Graduation: 1 st/lb (1 kg)

www.distrimed.com

Caractéristiques

- Cadran surélevé blanc nacré de 18 cm
- Précision et fiabilité.
- Convient à toutes les décorations.
- Fabrication résistante, finition porcelaine.

Installation du pèse-personne

Le pèse-personne doit être utilisé sur une surface dure et plane pour une pesée précise. Une utilisation sur de la moquette n'est pas conseillée. Installer le pèse-personne sur un tapis très souple et épais peut avoir une incidence sur la précision de la pesée.

Instructions d'utilisation

Avant d'utiliser le pèse-personne, laissez-le atteindre la température de la pièce, puis effectuez plusieurs cycles de pesée comme suit :

Montez sur le pèse-personne et laissez l'aiguille se stabiliser.

Descendez du pèse-personne et laissez l'aiguille se stabiliser.

Après avoir terminé les cycles de pesée, réglez l'aiguille du cadran sur zéro si nécessaire (bouton de réglage sous le bord de la plate-forme) et répétez les cycles de pesée jusqu'à ce que le relevé du zéro soit stabilisé.

Si le pèse-personne est déplacé, un nouveau réglage du zéro peut s'avérer nécessaire. Répétez la procédure ci-dessus.

Pendant la pesée, placez les pieds sur la plate-forme de manière à ce que le poids soit centralisé.

Installez sur une surface dure et plane.

Entretien

Un nettoyage de temps en temps avec un chiffon doux et un savon léger conservera la beauté de votre pèse-personne. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Votre pèse-personne ne nécessite aucun type de graissage ou de lubrification.

Service après-vente

Veuillez contacter le bureau Tanita le plus proche pour ce qui concerne le fonctionnement ou un problème, une demande de réparation et/ou une commande de pièces détachées pour les produits.

Garantie limitée 10 ans avec preuve d'achat valide.